
Упътване за употреба на Zapper S5 AUTOMATIC



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметър	Стойност
1.	Захранване	батерия тип 6F22 (6LF22), 9 V
2.	Консумация	не повече от $5,5 \cdot 10^{-3}$ A
3.	Входна мощност	не повече от 0,05 W
4.	Брой сеанси с една батерия	не по-малко от 20
5.	Честота и амплитуда на сигнала	30 kHz \pm 1%; 9V
6.	Сила на тока	не повече от 1.10^{-3} A
7.	Режим на работа	Цикличен, продължителен
8.	Брой на циклите на въздействие	3
9.	Обща продължителност на сеанса	61 min \pm 5%
10.	Клас на защита	II
11.	Климатични условия за експлоатация: - температура на околната среда; - относителна влажност на въздуха;	18 – 24 °C 65 – 80 % при 20°C
12.	Маса на изделието	240 g



Упътване за употреба на Zapper S5 AUTOMATIC

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди употреба, разопаковайте уреда. Ако той е внесен от външна среда с ниска температура е необходимо да престои при стайна температура минимум един час преди включване, за да се предотврати повреда или неправилна работа.

На задната страна на уреда се намира гнездото за батерията (фиг.1). Притиснете надолу (1) и изтеглете (2) капака на гнездото. Изтеглете батерийния клипс (фиг.2) и присъединете нова 9 V батерия тип 6F22 или 6LF22. Бъдете внимателни при поставянето на батерията. Тя има широк отрицателен и по-тесен положителен електрод (фиг.3). Батерийният клипс има същите по форма и размери контакти. Ориентирайте батерията към клипса, както е показано на фиг.4. и ги притиснете до заключване (фиг.5).

Поставете батерията в батерийното гнездо (фиг.6) и я притиснете надолу. Поставете капака (фиг.7) и го притиснете в последователността показана на фиг.8.



фиг.1



фиг.2



фиг.3




фиг.4




фиг.5



фиг.6

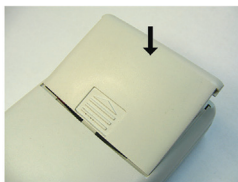


фиг.7

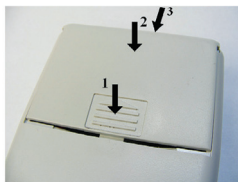

фиг.8

Качеството на батерията е определящо за броя на лечебните сеанси, които могат да се проведат до пълно изчерпване на капацитета ѝ. Ако уредът няма да бъде използван продължително време, извадете батерията, за да се предотврати изтичане на електролит и последващите от това повреди.

На фиг. 9 са показани елементите за управление и индикация.

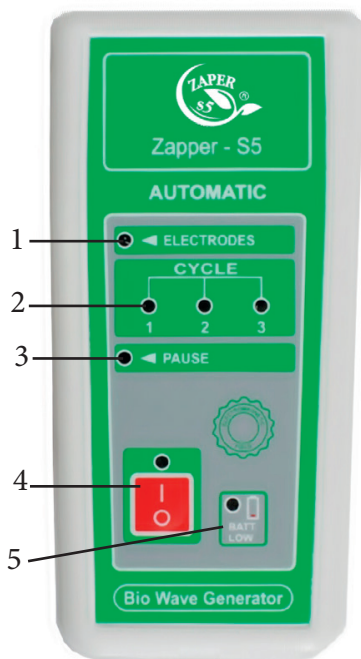

Фиг. 9 Лицев панел на уреда

1 – индикатор за контакт с електродите; 2 – индикатори на циклите; 3 – индикатор за пауза; 4 – бутон за включване и изключване; 5 – индикатор за състоянието на батерията.

Уредът се включва чрез натискане на бутон 4 (I/O). Ако правилно сте поставили батерията, индикаторът, намиращ се над бутона, показващ, че уредът е включен, ще светне и ще се чуе кратък прекъснат звуков сигнал. Индикаторът за състоянието на контакта с електродите 1 (**ELECTRODES**) ще свети постоянно.

Хванете електродите с две ръце или хванете единия електрод с едната ръка, а босото ходило на противоположния крак поставете върху другия електрод. Ако електрическият контакт с електродите е добър, индикаторът 1 (**ELECTRODES**) ще загасне, а индикаторът за цикъл 1 ще започне да премигва, показвайки, че уреда работи в първи цикъл. Ако при контакт с електродите, уредът не премине автоматично в режим на работа по първи цикъл, това е показател, че кожата е суха и не провежда в достатъчна степен електрическият ток. За да подобрите контакта, леко навлажнете кожата на ръцете. Силата на протичащия ток е ограничена до безопасна стойност.

По време на сеанса няма да усетите дразнене на кожата или мускулни спазми. Това е възможно само при хора с повишена сензитивност.

Дръжте електродите до края на работния цикъл. След края на цикъла ще се чуете кратък прекъснат звуков сигнал. Индикаторът за цикъл 1 ще изгасне и ще започне да премигва индикатор 3 (**PAUSE**). По време на паузата може да оставите електродите. След изтичане на паузата, ще се чуе звуков сигнал, показващ началото на втори цикъл и така нататък.

ЕЛЕКТРОДИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПИРАТ ЕДИН ДО ДРУГ! ТОВА ВОДИ БЪРЗО ИЗТОЩАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА.

Индикаторът за състоянието на батерията 5 (Batt Low) светва, когато тя е разрежена под критично ниво и следва да се подмени с нова. Светването на индикатора по време на сеанс не означава, че сеансът трябва да бъде прекратен. Оставящият заряд на батерията е достатъчен да продължите работа до приключване на сеанса. За следващ сеанс е наложително батерията да се подмени с нова.

Уредът има три работни цикъла с продължителност седем минути, разделени от две паузи от двадесет минути:

Цикъл 1 7 мин	Пауза 1 20 мин	Цикъл 2 7 мин	Пауза 2 20 мин	Цикъл 3 7 мин
-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

Сеанс - 61 мин

След приключване на първия цикъл, уредът издава прекъснат звуков сигнал, индикаторът за първи цикъл изгасва и светва индикатор 3 (**PAUSE**). През следващите двадесет минути може да оставите електродите настрана и да изчакате. Когато електродите не се в контакт с тялото, индикатор 1(**ELECTRODES**) няма да се включи.

След изтичане на двадесет минути се чува звуков сигнал, показващ начало на втори цикъл. Индикаторът 3 (**PAUSE**) изгасва, а индикаторът за втори цикъл започва да мига. Хванете електродите. Ако индикатор 1 (**ELECTRODES**) мига, навлажнете кожата на ръцете, за да подобрите контакта.

След изтичане на втория цикъл следва втората пауза и така нататък. След изтичане на третия цикъл се чува звуков сигнал, след което уредът се изключва автоматично.

Ако ви се наложи да прекъснете сеанса за кратко, не е необходимо да изключвате уреда. Достатъчно е да пуснете електродите. Уредът автоматично преминава в режим на изчакване. Може да прекъснете работата на уреда по време на всеки цикъл, като времето на прекъсване не се отчита. За да продължите работа, е необходимо само отново да хванете електродите.

Може да изключите уреда по време на работа, като натиснете бутона 4 (I/O). Изключването на уреда води до нулиране на отчетените до момента цикли. При следващо включване сеанса започва от първи цикъл.

За ефективно провеждане на сеансите, изберете подходящо спокойно място – легло, диван или фотьойл, далеч от шум и източници на електромагнитни лъчения (телевизор, микровълнова фурна, мобилни телефони), които могат да доведат до неправилна работа на уреда. Не носете дрехи от синтетични материали. Те създават статични електрически заряди, които снижават ефекта от процедурите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Продължителността на курса на въздействие зависи от тежестта и давността на заболяването и може да бъде от 7 до 28 дни с ежедневно провеждане на сеанси. При необходимост курсовете се повтарят след прекъсване от две до три седмици, до изчезване на симптомите.

За профилактика се провежда един сеанс на ден в течение на седем дни. При остри заболявания сеансите могат да се повтарят 2–3 пъти на ден в продължение на 20–28 дни.

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не се препоръчва използването на Запера от бременни и кърмещи, деца под 5 години и хора с кардиостимулатори.

Същинско очистване на организма

Въздействието с уреда **ZAPPER S5 AUTOMATIC** дава възможност да се постигнат отлични резултати за кратък период от време. Задължително условие за максимална ефективност и подкрепа на организма по време на употреба на уреда е спазването на няколко условия:

Спазвайте изрично указанията за употреба на уреда.

Максимален ефект за очистване на организма и подкрепа на обменните процеси се постига с комбинация и употребата на уреда за сребърна вода и билката седемчатка (пелин, орех и карамфил, бял трън, глухарче, риган масло, котешка стъпка). Между приема на сребърната вода и билката седемчатка трябва да има интервал от 30-40 минути. Това е гаранция за изхвърляне на мъртвите паразити от организма и подкрепа на вътрешните баланси в дейността на полезната микрофлора.

По време на лечението да се ограничават храни, съдържащи глутен, мая, бяла захар и животински белтък. Млечните и местните храни, ако не могат да се ограничават, задължително трябва да минават термична обработка (варене, печене).

За ускоряване на процеса на изхвърляне на мъртвите паразити, токсини и шлаки от организма, е желателно антипаразитната програма с биорезонансния апарат Zapper-S5 Automatic да се проведе след употребата на продуктите, описани в точка 2. По време на паузите е препоръчително да се правят допълнителни прочиствания, указания за които можете да прочетете в точка 5.

Отидете на www.zapper.bg От менюто „Лечения“ ще се отвори подменю „Прочистване на черният дроб, жлъчката и храносмилателната система“.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко процедури се правят дневно и за какъв период?

Правят се от 1 до 3 процедури дневно в продължение на 15-30 дни. След което се прави пауза и ако е необходимо процедурите се повтарят до изчезване на симптомите.

Когато апарата се ползва профилактично, са достатъчни 1–2 сеанса седмично.

Желателно е апаратът да се ползва от цялото семейство (дори и от деца над 5 години).

Защо е нужен продължителен период на лечение?

Биорезонансният апарат Zapper–S5 AUTOMATIC унищожава всички видове паразити само с една процедура.

Но гъбичката „кандида“ (неканен, но присъстващ гост във всеки организъм) е сред най-големите врагове на човека, наравно с паразитите. Тя живее вътре в нашите клетки (на много слоеве) и се унищожава по-трудно. Ето защо е нужен 15–30 дневен период на лечение, за да се премахне напълно.

Доказано е, че освен здравословни проблеми от всякакъв характер, гъбичката *Candida albicans*, наред с паразитите, е основният причинител на кисти, тумори и рак.

Вярно ли е, че ZAPPER S5 AUTOMATIC лекува посочените болести?

Болести и диагнози има хиляди! А причините са паразити, вируси и бактерии. Съвременната „модерна“ медицина поставя диагнози и лекува симптоми. Истинското лечение премахва причината. ZAPPER S5 AUTOMATIC отстранява причините за болестите – паразити, вируси и бактерии и организмът сам се лекува. Когато се премахне причината, изчезват и симптомите, и болестта. Няма причина, няма и следствие, логично и просто! Гениалните неща са прости, величието е в простотата!

Има ли някакви странични ефекти?

НЕ, но са възможни лечебни кризи!!!

Какво означава лечебна криза?

Лечебните кризи показват, че в организма протичат изчистващи и оздравителни процеси, които са резултат на масовото

унищожение и изхвърлянето на паразитите и токсините от тялото. Симптоми за лечебните кризи могат да бъдат прилошаване, гадене, повръщане, разстройство, обриви по кожата, температура, отпадналост и др. Тези възможни лечебни кризи трябва да се посрещнат позитивно. Всичката мръсотия, натрупана в организма, трябва да излезе по някакъв начин. В противен случай живеем с цялото това „БОГАТСТВО“ вътре в нас. Това е истинското лечение. Лечения, които третират симптомите, а НЕ първопричините, са илюзия и пародия на лечение.

Защо е желателно успоредно с процедурите с апарата ZAPPER S5 AUTOMATIC да приемаме сребърна вода и билката седемчатка (пелин, орех, карамфил, бял трън, глухарче, риган масло, котешка стъпка)?

Сребърната вода, приготвена с уреда Dr. Silver, подпомага изчистването на организма от бактерии, токсини и шлаки. Двата уреда имат сходни, но различни свойства на действие. Допълват се взаимно и образуват уникална комбинация (синергизъм). Казано по-простичко, те са перфектната двойка (ин и ян).

Всяка билка, особено в комбинация с други билки, както е при седемчатката (пелин, орех, карамфил, бял трън, глухарче, риган масло, котешка стъпка), има мощен подкрепящ ефект за целия организъм.

Защо има Запери, които работят с различни честоти и адаптери и такива, които работят с универсална честота 30 kHz и с 9 V батерия?

В началото на своите изследвания д-р Кларк е работила с различни честоти, но ето какво казва тя по-късно:

„Последващи изследвания показаха, че НЕ различните честоти са унищожили всички нашественици. Ефективността се дължеше на положително настроената честота и на това, че Заперът работи с БАТЕРИЯ! Предполагам, че положителното електричество, приложено където и да е върху тялото, привлича отрицателно натоварените обекти, каквито са паразитите, вирусите и бактериите. Може би волтажът на батериите ги притиска и издърпва от тяхната локация. Възможността да бъдат унищожени всички нашественици чрез Зепинг/Запер само за 7 минути, може наистина да стане панацея! Няма нужда да се установяват определени честоти и да се преминава подред през всички честоти килохерц по килохерц.

При достатъчно напрежение (5–10 волта) и продължителност 7 минути, всяка положително настроена честота (между 10 и 30 kHz) убива едновременно всички паразити, бактерии и вируси.

Генерирането на положителни честоти е най-добрият и бърз начин за унищожаване на патогенните организми.“

(Откъс от книгата на д-р Хулда Кларк)

Защо ZAPPER S5 AUTOMATIC работи вече над 20 години по схемата на д-р Кларк с една единствена универсална честота от 30 kHz и с батерия 9 V?

Освен че се съобразяваме с изследванията, доказателствата и логиката на д-р Хулда Кларк, имаме и доста личен опит.

Без значение какъв здравословен проблем имате, вие няма как да разберете какъв точно паразит имате в тялото си, за да го унищожите с определена честота. Това е така, защото и до днес в модерната медицина не съществуват каквито и да е било изследвания, които да открият наличието на точно определен паразит, вирус или бактерия.

Защо не съществуват такива изследвания? На този въпрос може да си отговори всеки един човек.

Дори и да се открие чрез някакво изследване (почти невъзможно) точно определен паразит, има голяма вероятност да се пропусне някой друг. Когато се работи с различни честоти или с различни програми за определен паразит, вие унищожавате само този конкретен паразит, но какво се случва със останалите паразити, вируси и бактерии, които не са открити?

Може би несъзнателно д-р Хулда Кларк е направила още една ОГРОМНА услуга на обществото. Създаде Запер, който доказано унищожаваше всички видове паразити, вируси и бактерии. Може да се ползва от всеки човек, дори без познания в медицината и без да се налага да се знае точния паразит и честота, с която се унищожаваше.

Още един път ще повторим казаното от д-р Кларк:

„Последващи изследвания показаха, че НЕ различните честоти са унищожили всички нашественици. Ефективността се дължеше на положително настроената честота и на това, че Заперът работи с БАТЕРИЯ!

При достатъчно напрежение (5–10 волта) и продължителност 7 минути, всяка положително настроена честота (между 10 и 30 kHz) убива едновременно всички паразити, бактерии и вируси.

Генерирането на положителни честоти е най-добрият и бърз начин за унищожаване на патогенните организми.“

Защо да изберете ZAPPER S5 AUTOMATIC?

- Имаме над 20-годишен опит в производството на иновативни продукти от изтъкнати инженери, без компромиси в качеството.
- Абсолютно безопасен за човешкото здраве, но смъртоносен за паразити, вируси и бактерии.
- Компактен, автоматичен и лесен за използване, не се изискват никакви познания за работа с апарата.
- Можете да го носите навсякъде с Вас – тежи само 240 г.
- Хиляди доволни клиенти.
- Безплатни онлайн консултации и допълнителна подкрепа за неограничен период от време от наш компетентен представител.
- Достъпна цена. Ние подкрепяме желанието на д-р Хулда Кларк технологиите ѝ да бъдат достъпни за всеки, без излишно оскъпяване и спекулации.

Освен че унищожават всички видове паразити, вируси и бактерии по схемата на д-р Кларк, ZAPPER S5 AUTOMATIC оказва подкрепящо действие върху целия организъм и действа стимулиращо върху имунната система, като по този начин повишава устойчивостта на бъдещи атаки от паразити. Видимо повишава жизнения тонус, подобрява паметта и мозъчната дейност. Друго положително действие на апарата е ускоряването на метаболизма на клетъчно ниво (обмяната на веществата), като по този начин намалява затлъстяването и наднорменото тегло.

Нашата мисия или защо правим това?

За да помогнем на възможно най-много хора да получат полезна и ценна информация, с която да обогатят здравната си култура. Здравна култура = Живот без болести.

Няма nelечима болест, има nelечим болен! Здравето е във Вашите ръце!

ВАЖНО: ZAPPER S5 AUTOMATIC не е сертифициран медицински продукт. В този смисъл апаратът може да се причисли към уредите за индивидуална електростимулация и домашно

ползване с цел прочистване и унищожаване на паразити, вируси и бактерии. Тук бихме желали да отбележим, че биорезонансната диагностика не е сертифицирано медицинско изследване. Това е парадоксално, защото в същото време тя е най-точната и надеждна диагностика в света с до 95% точност за състоянието на всички органи и системи. Не на последно място, биорезонансната диагностика открива наличието на голям брой паразити, вируси и бактерии, присъстващи в организма. Никоя друга диагностика, макар и „сертифицирана“, НЕ дава такава комплексна, пълна и точна картина на състоянието на човека.

РЕЗЮМЕ: Важно е да разберете и осъзнаете следното: Вашият организъм е уникална самолекуваща се система, способна да се излекува от всякакви болести. Но той трябва да получи помощ и подкрепа, както и възможност да го направи, като се започне от отстраняването на първопричината за заболяването – паразити и токсини.

В този ред на мисли, бихме искали да кажем още един път:

Въпреки многобройните си ползи и доказани ефекти, ZAPPER S5 AUTOMATIC НЕ ЛЕКУВА БОЛЕСТИТЕ, а отстранява причините за тях и позволява на организма да се лекува САМ.

*„Отстранете причината, тогава ще премине и болестта.“
Хипократ*

ПРОТИВОКАЗАНИЯ: Да НЕ се използва от хора с кардиостимулатори, деца, бременни и кърмещи жени!

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Производителят/търговецът се стреми да публикува на уебсайта <http://www.zapper.bg/> както и в тази изчерпателна книжка, възможно най-пълна, проверена и лично доказана точна информация. Въпреки доказателствата, логиката и фактите, производителят/търговецът не гарантира и не претендира, че предоставената на уебсайта и тук информация е изцяло достоверна, точна, пълна или без грешки. Производителят/търговецът нямат за цел да предписват лечение. Информацията тук и в сайта е има общообразователен характер и цел да Ви информира!

Можеш да помогнеш на някой, като му покажеш правилния път, по който да върви, но не можеш да му помогнеш, ако той сам не поеме по него! Преди да пристъпите към лечение, моля консултирайте се с Вашият лекар!

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА:

- 1 Био-вълнов генератор ZAPPER S5 AUTOMATIC – 1 бр.
- 2 Батерия – 1 бр.
- 3 Техническо описание и инструкция за експлоатация – 1 бр.
- 4 Опаковка – 1 бр.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Спазването на правилата от настоящата инструкция е в интерес на потребителя и е условие за изпълнението на гаранционните условия.

Био-вълновият генератор ZAPPER S5 AUTOMATIC е изработен в съответствие с техническа спецификация TC-GM-12-2010 и отговаря на техническата документация. Фирмата производител си запазва правото да внася технически изменения в схемата на устройството, при запазване на всички технически и функционални характеристики на уреда. Фирмата производител, чрез дистрибутора и търговеца, осигурява 36 (тридесет и шест) месеца гаранционно обслужване, при условие, че са спазени всички условия за правилна експлоатация.

При рекламация на уреда задължително се представя гаранционната карта.

При условие, че не са спазени условията за експлоатация, рекламацията не се уважава и ремонта на уреда се заплаща от клиента. Фирмата не удовлетворява рекламации в случаите, когато:

- е правен опит за отстраняване на дефектите от неоторизирани лица;
- не са спазени условията за експлоатация, посочени в настоящото „Техническо описание и инструкция за експлоатация“;
- са нанесени повреди при неправилно транспортиране;
- купувачът не е представил гаранционна карта;
- повредата е причинена от външни химични или физични фактори през периода на експлоатацията;
- отклоненията в работата на уреда са резултат от разредена батерия.

При закупуване на уреда проверете правилното попълване на гаранционната карта, където трябва да са нанесени датата на закупуване на изделието, фабричният номер, подписът на продавача и печатът на фирмата. Пазете гаранционната карта, тя ви дава право на безплатен ремонт в рамките на гаранционния срок.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименование на изделието:
Био-вълнов генератор Zapper” S5-AUTOMATIC

Консултант:.....

.....

.....

Телефон:.....

.....

.....

Клиент:.....

.....

.....

Дата:.....

Фабричен номер:

Адрес на сервиза: София 1000, ул. Княз Борис I № 162

.....

.....

.....

тел.

.....

.....

Гаранционен срок – 36 месеца от деня на продажбата при условие, че са спазени правилата за експлоатация на уреда. Гаранцията отпада при констатирани механични дефекти, получени при неправилно съхранение и експлоатация, както и при констатирани опити за неоторизирани ремонти.

Възможни са печатни грешки!

Упътване за употреба на Zapper S5 AUTOMATIC

Допълнителни характеристики

Интензитет на АС магнитна индукция излъчвана от печатна антена, μT ;

№	Място на измерване	Интензитет на магнитна индукция, μT	Допустимо време на престой в полето
1.	На 1 см от задния панел на уреда	0,063	неограничено
2.	На 5,0 см от задния панел	0,052	неограничено
3.	На 10 см от задния панел	0,026	неограничено
4.	На 20 см от задния панел	0,016	неограничено
5.	На 30 см от задния панел	0,010	неограничено
6.	На 50 см от задния панел	0,009	неограничено

ВАЖНО!!!!

За най-изразен ефект на въздействието на електромагнитното поле, апарата (задната част на панела), трябва да бъде поставен в областа на корема-пъпа, или директно на засегнатия орган, или проблемно място в директен контакт с Вас, като същевременно с това се държат и електродите.

Електромагнитното поле не работи без контакт с електродите!

